

RACCOLTA CAMPIONE in Fibrosi Cistica: what, when and how?

ESPETTORATO. Gold Standard.

Quando? Lontano dal pasto, preferibilmente al mattino appena svegli prima delle terapie
Come? Raccolta campione dopo lavaggio della bocca con acqua sterile o sol. Fisiologica con spazzolino.
Frequenza? Ad ogni riacutizzazione respiratoria o comunque ogni 3 mesi.

Contenitore a bocca larga sterile e con tappo a vite



CONSERVAZIONE:
Inviare subito al laboratorio o conservare a 4°C il minor tempo possibile.

TAMPONE FARINGEO.

Per coloro che non riescono ad espettorare spontaneamente.
Quando? Lontano dal pasto, preferibilmente al mattino appena svegli, dopo aver sciacquato la bocca con acqua sterile o sol. Fisiologica con spazzolino.
Come? Eseguire tampone dopo aver stimolato colpo di tosse.

Provette tappo rosa (E-SWAB AUTOMATION REGULAR FLOCKED) oppure tampone con gel di trasporto



CONSERVAZIONE:
Inviare subito al laboratorio o conservare a 4°C il minor tempo possibile.

LAVAGGIO NASALE.

Utilizzo del lavaggio nasale per raccogliere materiale biologico.
Quando? Lontano dall'esecuzione dell'aerosol con antibiotico.
Come? Si esegue il lavaggio nasale raccogliendo materiale di lavaggio in contenitore sterile.
In alternativa- Tampone Nasale su prescrizione medica*

Contenitore a bocca larga sterile e con tappo a vite



CONSERVAZIONE:
Inviare subito al laboratorio o conservare a 4°C il minor tempo possibile.

Utilizzare max 10 ml
soluzione fisiologica

ASPIRATO IPOFARINGEO

Per coloro che non riescono ad espettorare spontaneamente, eseguito con sondino sterile.
Quando? Lontano dal pasto, preferibilmente al mattino appena svegli dopo aver sciacquato la bocca con acqua sterile o sol. fisiol.
Avvertenze: digiuno del pz per evitare vomito.

Appostito contenitore sterile raccordato al tubo aspirazione




Utilizzare max 10 ml
soluzione fisiologica

CONSERVAZIONE:
Inviare subito al laboratorio o conservare a 4°C il minor tempo possibile.

BAL.

Permette di isolare sterilmente microrganismi delle basse vie aeree.
Quando? Richiede il quadro clinico.
Come? Sterilmente, in sala operatoria, previa sedazione.

Contenitore sterile (provetta o contenitore a bocca larga e tappo a vite)

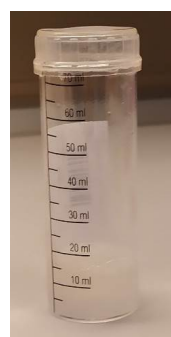

Utilizzare max 10 ml
soluzione fisiologica

CONSERVAZIONE:
Inviare subito al laboratorio o conservare a 4°C il minor tempo possibile.

* tampone E-swab, entrambe le narici. Senza lavaggio pre, no terapie aerosoliche antibiotiche pre-esecuzione.